


کیسه خون دوتایی

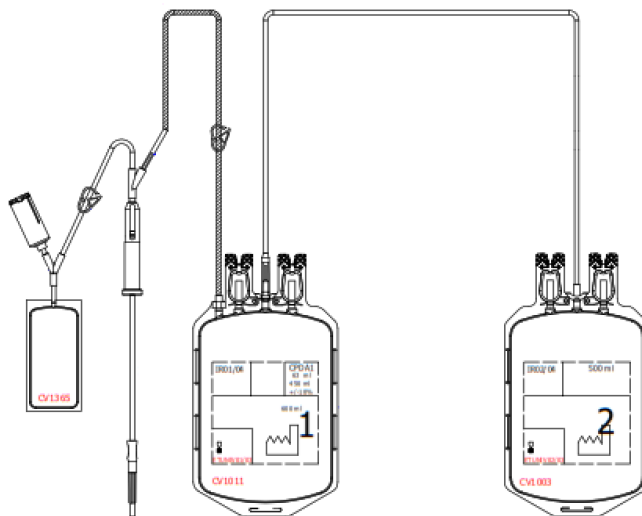

تولید کننده	پیشرو تشخیص فردآور
نام محصول	کیسه خون دوتایی
مشخصات	استریل، قابل تزریق، فاقد مواد تب زا و اندوتوکسین
رفرنس نامبر	BDA063B
شرح محصول	کیسه خون دوتایی به منظور جمع آوری خون اهداکننده به شکل کاملا بهداشتی و مطابق با تجویز پزشک به کار می رود. این محصول استریل، یکبار مصرف و قابل تزریق می باشد.
کاربرد	به منظور جمع آوری خون و پلاسما در دو کیسه مجزا قابل انتقال می باشد
بسته بندی	از فیلم بسته بندی شفاف از جنس PVC با قابلیت فورمینگ و تحمل استریل تعداد کیسه در هر بسته بندی یک عدد
ماندگاری	۱۸ ماه پس از تاریخ تولید
استریل	اتوکلاو بخار
جنس کیسه خون	PVC مدیکال گرید
استاندارد	ISO 13485 و ISO 3826-1
نوع و مقدار محلول ضد انعقاد	CPDA1 63 ml
گواهی	نشان CE
تیوب	تیوب از جنس PVC مدیکال گرید شفاف
سوزن خون گیری	سوزن خون گیری G16
قطعه شکستنی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان و اجزای خون می شود.
محافظ سوزن	محافظ سوزن از جنس PP متناسب با سایز سوزن و با عملکرد مناسب و راحت جهت پوشش سوزن پس از خون گیری
کلمپ	کلمپ از جنس PP با عملکرد مناسب و راحت جهت بستن مسیر تیوب پس از خون گیری
پرچسب	مطابق با استاندارد ایزو 3826-2 حاوی اطلاعات بچ نامبر، لات نامبر، تاریخ تولید و تاریخ انقضا
اتصال دهنده وای شکل	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.